

Información sobre productos Encaje confort



Contenido

• Liner de silicona	15 – 26
• Liner de gel	27 – 34
• Auxiliares de aplicación.....	35 – 39
• Cuidados y accesorios.....	40 – 41
• Medias de muñón	42 – 60
• Explicación de los símbolos	62

Encaje confort – Gama completa desde el liner hasta la terapia de compresión

Con una amplia selección de liners de silicona y gel, auxiliares de aplicación, medias para muñón (de compresión) y accesorios de cuidado para el encaje confort, Streifeneder ortho.production GmbH ofrece una gama completa de alta calidad en el campo de las prótesis de pierna.

Todos los productos se caracterizan por el uso de materiales de primera clase, alta funcionalidad y larga duración. Las numerosas características mejoradas del producto proporcionan aún más estabilidad y una sensación de comodidad para las prótesis de pierna. Todos los artículos de nuestra gama están perfectamente adaptados entre sí y ayudan al especialista a reaccionar a las necesidades individuales del usuario.

Dependiendo del perfil del usuario, los liners, las ayudas de aplicación y las medias para muñón están disponibles en varios diseños y en muchos tamaños.

Funcionalidad mejorada con las siguientes características




- nuevo diseño y tecnología de recubrimiento circular
- nuevos modelos de liner: SkinCare.Sil silicona especialmente blanda con aditivo de Aloe-Vera
- mejor ajuste y fácil manejo
- propiedades de acolchado optimizadas para todos los modelos del liner ContexGel
- nueva tapa de silicona de rotación suave
- línea de orientación de color, número de serie tejido
- tratamiento antibacteriano
- propiedades para el cuidado de la piel



Nueva tecnología de tejido de punto para una mayor calidad

Las costuras laterales de los liner de silicona y gel a menudo están sujetas a un desgaste prematuro debido a la fricción. Con el nuevo tejido de punto circular funcional hemos logrado desarrollar una técnica que prescinde completamente de las costuras laterales.

De este modo, los productos demuestran ser mucho más duraderos y resistentes que sus predecesores. El uso de un hilo de elastán fuerte en combinación con poliamida de alta calidad hace que la cubierta sea fácil de desenrollar y robusta. Una cinta de orientación de color y el número de serie ya están integrados en el tejido de punto para una trazabilidad óptima.

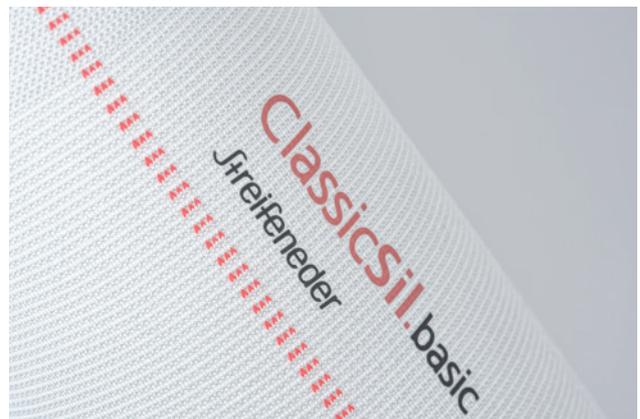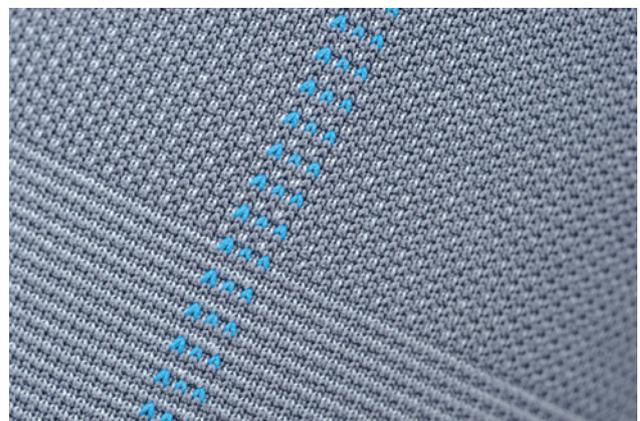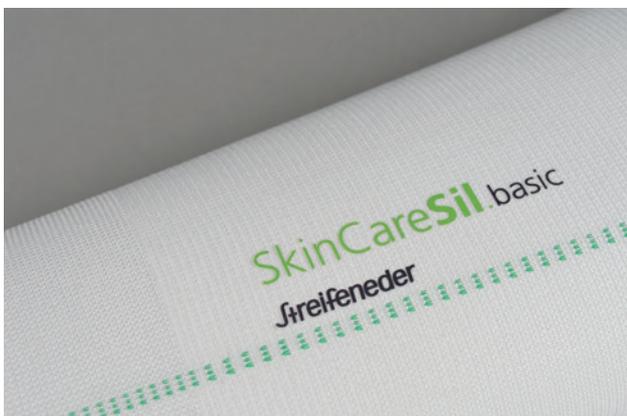

Sujeción perfecta por técnica de vacío para encaje (VST) – el Control4Sil.

El liner Control4Sil. con sus cuatro bordes de obturación en forma de anillo, proporciona una conexión segura entre prótesis y muñón. Hecho de silicona dermocompatible y con una capa especial de deslizamiento en el exterior, optimiza además la sensación de confort y uso. El liner de alta calidad se puede volver al revés sin problemas y se puede usar sin un medio auxiliar de colocación. Hay dos modelos disponibles: el Control4Sil.basic para un muñón de forma cilíndrica y el Control4Sil.conic para un muñón cónico.

El producto no está disponible en los siguientes países y regiones: Reino Unido (RU), Estados Unidos de América (EE.UU.).





Características

- cuatro bordes de obturación en forma de anillo para una segura adherencia en la técnica de vacío para encaje (VST)
- Grado de movilidad (Walky): 1 a 4
- para la protetización de amputaciones transfemorales o de amputaciones transtibiales voluminosas
- material: silicona, fácil de limpiar, puede utilizarse en zonas húmedas
- la matriz integrada reduce la carrera longitudinal mientras mantiene una elasticidad lateral ilimitada

Encaje confort – vista general

		ClearSil. compresión	ClearSil.basic	DuoSil.basic	SkinCareSil.basic SkinCareSil.soft
Sistema Walky					
Muñón - en forma de pera		XXXX postoperatorio	XX	X	XX 3 mm basic
Muñón cilíndrico normal		XXXX postoperatorio	XX	XX	XXXX 3 mm basic
Muñón cónico huesudo			X	X	XXXX 6 mm, blando
Muñón transfemoral cilíndrico		XXXX postoperatorio			
Muñón transfemoral cónico		XXXX postoperatorio			

XXXX = óptimo

XX = bueno

X = apropiado

PrimoSil.basic ComfortSil.basic ComfortSil.soft	ClassicSil.basic	AKControl.Sil	Control4Sil.basic	Control4Sil.conic	ContexGel.basic ContexGel.soft ContexGel.soft+
					
×	×	×			×
3 mm basic	3 mm basic				
×	×	×			×
3 mm basic	3 mm basic	para muñón transtibial de gran volumen			
×					×
6 mm, blando					
		×	×		×
					usar solo la versión de 3 mm
		×		×	usar solo la versión de 3 mm



Selección correcta del liner

Determinación de la talla en Liner de silicona

Mida la circunferencia distal aproximadamente 4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el Liner de silicona en esa talla (en caso de una protetización inicial) o una talla más pequeña (en caso de protetización sucesiva).

Determinación de la talla en Liner de gel

Mida la circunferencia distal aproximadamente 4 cm por encima de la punta del muñón y seleccione el tamaño del Liner ContexGel en la zona distal y proximal del muñón (medida 30 cm hacia arriba desde el extremo distal del muñón).

Recorte de los Liner de silicona

Cortar el borde del liner con las tijeras con corte ondulado (p.ej. Art. N° 166P36) para reducir la tensión circular. Ponga atención de dejar el liner preferentemente largo en lugar de demasiado corto.

¿Cómo cuidar el liner?

Antes de ponerse el liner por primera vez, límpielo a fondo con la loción de lavado Skin-Care 10H2 para evitar posibles irritaciones de la piel.

Ventajas del liner de silicona de Streifeneder

Liner con sello de calidad

Para aumentar la higiene al usar los liner, usamos aditivos especiales que crean un efecto de superficie aséptica.

Un aditivo se llama "Sterione" y es comercializado por la empresa SteriOne GmbH.

Esta tecnología patentada garantiza que el material del liner tratado esté acondicionado contra una nueva colonización de bacterias y microorganismos.

Los liner de Streifeneder ortho.production GmbH lleva un sello de calidad con lo que se les considera como «antibacterianos». El símbolo, presentado más abajo, indica el uso de Sterione para la obtención de una propiedad con efecto antibacteriano. Este efecto también fue confirmado por otro instituto de pruebas independiente.

El sello de calidad garantiza

- duración eficaz de por lo menos cinco años
- eliminación de al menos 5 millones de gérmenes por hora y cm^2

El uso de los Sterionen es eficaz contra

- bacterias (p. ej. neumococos, y microorganismos multiresistentes como SARM)
- cepas de ensayo Staphylococcus aureus y Escherichia coli

Los liner SkinCareSil tienen un aditivo de Aloe-Vera, por lo que son particularmente dermocompatible.

Control de rotación en los modelos PrimoSil, Comfort.Sil, Classic.Sil, AK-Control.Sil y SkinCare.Sil

- mayor estabilidad de rotación entre el liner y el encaje de la prótesis
- mejor guía y control de la prótesis

tiras antigiro en el modelo AK-Control.Sil 60L10

- mayor estabilidad de rotación entre el liner y el encaje de la prótesis
- mejor guiado y control de la prótesis transfemoral



Ventajas del liner de gel de Streifeneder

- la propiedad de fluidez (visco-elasticidad) del gel polímero, garantiza una distribución uniforme de la presión en el encaje, lo que significa que las fuerzas de presión y transversal sean reducidas considerablemente
- los aceites blancos medicinales contenidos en el gel polímero protegen la piel estresada del muñón y ayudan a la preservación de la humedad natural de la piel
- aditivo con efectos asépticos en la superficie en el gel polímero
- los liner Context-Gel son moldeables a 60 °C - para una adaptación óptima a las formas inusuales del muñón
- diferentes grosores de pared frontal (3, 6, 9 mm) con el mismo grosor de pared posterior (3 mm), es decir, acolchado adicional para la sustitución de tejidos blandos, especialmente en zonas sensibles a la presión
- forma cónica del liner para una mejor adaptación a la mayoría de las condiciones del muñón
- disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre de Streifeneder ortho.production
- disponible sin conexión distal para el modelado de muñón y para la técnica de vacío para encaje (VST)
- ideal para el tratamiento protésico de muñones de la parte inferior de la pierna, para usuarios de baja a media actividad con condiciones de muñón difíciles
- casi todos los liner (excepto: ClearSil.compression y Control4Sil) son adecuados para su uso a corto plazo en agua salada o clorada



Encaje confort - medias para muñón

- gran variedad de medias para muñones transfemorales, transtibiales y de brazo
- disponibles con o sin orificio para PIN, en diferentes grosores, materiales y colores
- terapia postquirúrgica de compresión
- compensación de las variaciones de volumen del muñón
- aumentar la vida útil de todas los liner
- acolchonamiento adicional para el liner o el encaje interior
- transpirable
- de larga duración

Auxiliares de aplicación ContexGel.sleeve

Los auxiliares de aplicación ContexGel.sleeve de Streifeneder ortho.production aseguran la correcta sujeción y ajuste de las prótesis de pierna. Precisamente en el campo de la técnica de vacío para encaje (VST) en prótesis transtibiales cortas, es especialmente importante evitar la infiltración de aire.

El ContexGel.sleeve actúa como una rodillera respectivamente caperuza de obturación, que impide la penetración de aire y junto con la válvula de descarga mantiene la prótesis de pierna fija al muñón del usuario.



Al levantarse y en la fase de apoyo una válvula de descarga genera una depresión continua, con lo que evita un deslizamiento de la prótesis y minimiza fuerzas transversales y de fricción desagradables para el muñón.

Formas tradicionales para la aplicación de prótesis las encuentra en un diseño moderno bajo AK-Suspend y BK-Suspend (referencia 300A1 y 23A1).

Estos llamados vendajes de sujeción para prótesis transfemoral respectivamente transtibiales, también proporcionan una conexión adecuada y favorecen con ello al guiado de la prótesis de pierna.



ClearSil.compression

Liner de compresión post operativo sin matriz interior y sin conexión distal

Uso


- compresión selectiva del muñón después de una amputación
- rápida familiarización con el manejo de un liner de silicona
- facilita temprana formación del muñón

Características

- liner de silicona sin matriz interior y sin conexión distal
- compresión controlada
- el vendaje no es necesario, por lo tanto ninguna restricción por envolvimiento falso
- favorece la circulación sanguínea y reduce la formación de edemas

Material

- espesor de la pared: ver croquis
- Clear-Sil silicona, firme, antibacteriano
- aprox. 50 Shore 00
- sin cubierta de tela
- color: translúcido

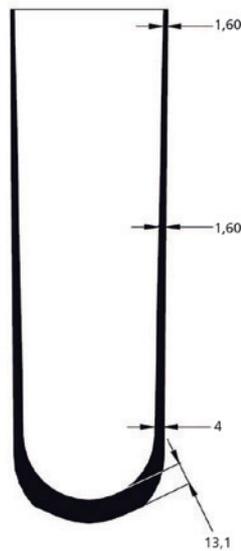

Gesamtlänge: ca 370 mm



Medidas	Referencia
23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	70L1/...

Ejemplo de pedido: 70L1/23,5 = med. 23,5



Para la aplicación del liner de silicona sin funda textil, se debe usar el Skincare spray 10H5. Por favor utilice la tabla de compresión contenida en el volumen de suministro para la documentación del volumen del muñón.



ClearSil.basic

Liner de silicona sin matriz interior, con y sin conexión distal

Uso

- grado de movilidad (Walky): 2 a 4
- adecuado para muñones cortos
- prótesis provisional y tratamiento inicial

Características

- liner de silicona sin matriz interior
- disponibles con y sin conexión distal
- muy buena propiedad de alargamiento distal
- la estabilidad de la silicona es apropiada para usuarios de prótesis de actividad media
- compresión selectiva del muñón

Material

- espesor de la pared: ver croquis
- Clear-Sil silicona, firme, antibacteriano
- aprox. 50 Shore 00
- sin cubierta de tela
- color: translúcido



Longitud total: aprox. 370 mm



Medidas	Conexión distal	Referencia
 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	con	72L1/...
 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	sin	73L1/...

Ejemplo de pedido: 72L1/12 = con conexión distal, med. 12

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 4 cm por encima del extremo final del muñón y seleccione el liner en el mismo tamaño o un tamaño más pequeño. Para la aplicación de liners de silicona sin recubrimiento de tela, se debe usar el spray SkinCare 10H5.



DuoSil.basic

Liner de silicona de dos capas con 10 cm matriz interior y con conexión distal



Uso

- grado de movilidad (Walky): 1 a 3
- atención primaria para usuarios de actividad media
- adecuado también para muñones en condiciones difíciles

Características

- liner de silicona de dos capas
- con revestimiento interior de silicona especialmente blando para un buen confort y óptima amortiguación
- capa externa de silicona más firme para mejor estabilidad y resistencia a la rotura
- la matriz interior de 10 cm reduce alargamiento axial
- con conexión distal

Material

- espesor de la pared: ver croquis
- Duo-Sil silicona, antibacteriano
- capa interior: aprox. 40 Shore 00, capa exterior: aprox. 50 Shore 00
- sin cubierta de tela
- color: carne

Medidas	Matriz interior	Referencia
16, 18, 20, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	10 cm	75L1/...



Ejemplo de pedido: 75L1/16 = med. 16



Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 4 cm por encima del extremo final del muñón y seleccione el liner en el mismo tamaño o un tamaño más pequeño. Para la aplicación de liners de silicona sin recubrimiento de tela, se debe usar el spray SkinCare 10H5.

Longitud total: aprox. 370 mm





PrimoSil.basic

Liner de silicona especialmente blanda de 3 mm

Uso


- grado de movilidad (Walky): 1 a 3
- adecuado como cuidado inicial o provisional para usuarios de actividad nivel bajo a intermedio
- adecuado también para muñones en condiciones difíciles

Características

- de silicona especialmente blanda de 3 mm
- comodidad óptima y agradable amortiguación
- revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado del liner
- matriz externa distal con tejido de punto de 10 cm, reduce el trazo distal
- el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
- disponible con conexión distal y control de rotación para todos los tipos de Pin o sistemas de cierre de Streifeneder
- disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación para la técnica de vacío para encaje (VST)

Material

- espesor de pared: 3 mm, ver croquis
- silicona médica especialmente blanda, sin tratamiento antibacteriano
- aprox. 26 Shore 00
- funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
- silicona control de rotación distal
- color: color arena

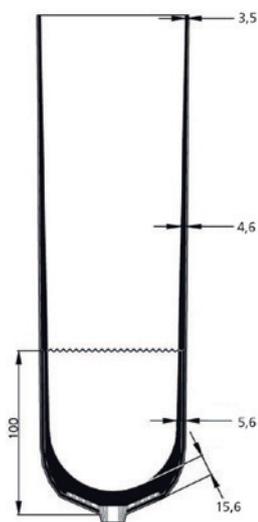

Medidas	Espesor de la pared	Matriz exterior	Conexión distal	Referencia
16, 18, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	10 cm	con	44L10/...
16, 18, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	sin	sin	44L20/...

Ejemplo de pedido: 44L10/16 = con conexión distal, med. 16. Suministro incluye tendedor.


Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en ese tamaño o una talla más pequeña.

Gesamtlänge: ca. 370 mm



SkinCareSil.basic

Liner de silicona especialmente blanda de 3 mm con aditivo de Aloe Vera

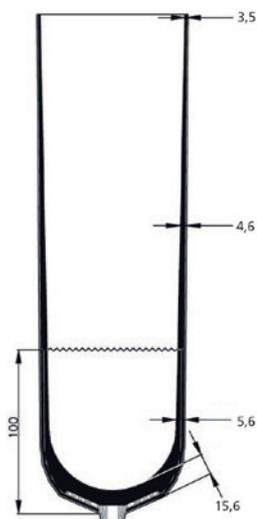

Uso

- grado de movilidad (Walky): 1 a 2
- especial para el tratamiento de muñones sensibles con enfermedades cutáneas y vasculares
- especialmente adecuado como atención inicial o geriátrica para usuarios poco activos

Características

- de silicona especialmente blanda de 3 mm
- propiedades de cuidado de la piel gracias al aloe vera añadido a la silicona
- comodidad óptima y agradable amortiguación
- tejido de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado del liner
- matriz externa con tejido de punto de 10 cm, reduce el trazo distal
- alta elasticidad transversal - también en la zona distal
- franja vertical tejida en la parte delantera para una mejor orientación al vestirse
- el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
- disponible con conexión distal y control de rotación para todos los tipos de Pin o sistemas de cierre de Streifeneder
- disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación para la técnica de vacío para encaje (VST)

Material

- espesor de pared: 3 mm, ver croquis
- silicona médica especialmente blanda con aditivo de Aloe Vera, tratamiento antibacteriano
- aprox. 28 Shore 00
- funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
- silicona control de rotación distal
- color: gris argentado

Medidas	Espesor de la pared	Matriz exterior	Conexión distal	Referencia
16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	10 cm	con	46L10/...
16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	sin	sin	46L20/...

Ejemplo de pedido: 46L10/16 = con enlace distal, medidas 16. Suministro incluye tendedor.

Gesamtlänge: ca. 370 mm



E Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en ese tamaño o una talla más pequeña.



ComfortSil.basic

Liner de silicona especialmente blanda de 3 mm

Uso


- grado de movilidad (Walky): 1 a 3
- adecuado para la atención primaria para pacientes geriátricos
- para usuarios sensibles a la presión

Características

- de silicona especialmente blanda de 3 mm
- comodidad óptima y agradable amortiguación
- tejido de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado del liner
- matriz externa distal con tejido de punto de 10 cm, reduce el trazo distal
- franja vertical tejida en la parte delantera para una mejor orientación al vestirse
- el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
- disponible con conexión distal y control de rotación para todos los tipos de Pin o sistemas de cierre de Streifeneder
- disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación para la técnica de vacío para encaje (VST)

Material

- espesor de pared: 3 mm, ver croquis
- silicona médica especialmente blanda, tratamiento antibacteriano
- aprox. 26 Shore 00
- funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
- silicona control de rotación distal
- color: gris argentado

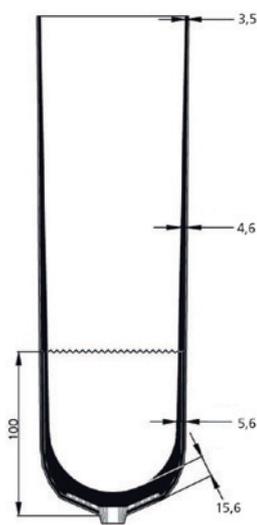

Medidas	Espesor de la pared	Matriz exterior	Conexión distal	Referencia
16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	10 cm	con	40L10/...
16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	sin	sin	40L20/...

Ejemplo de pedido: 40L10/16 = con conexión distal, med. 16. Suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en ese tamaño o una talla más pequeña.

Gesamtlänge: 370 mm





ComfortSil.soft

Liner de silicona especialmente blanda de 6 mm



Uso


- grado de movilidad (Walky): 1 a 3
- adecuado para la atención primaria para pacientes geriátricos
- para usuarios sensibles a la presión
- para muñón de pierna huesudo con reducida cobertura de tejidos blandos

Características

- de silicona especialmente blanda de 6 mm
- comodidad óptima y agradable amortiguación
- tejido de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado del liner
- matriz externa distal con tejido de punto de 10 cm, reduce el trazo distal
- franja vertical tejida en la parte delantera para una mejor orientación al vestirse
- el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
- disponible con conexión distal y control de rotación para todos los tipos de Pin o sistemas de cierre de Streifeneder
- disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación para la técnica de vacío para encaje (VST)

Material

- espesor de pared: 6 mm, ver croquis
- silicona médica especialmente blanda, tratamiento antibacteriano
- aprox. 26 Shore 00
- funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
- silicona control de rotación distal
- color: gris argentado

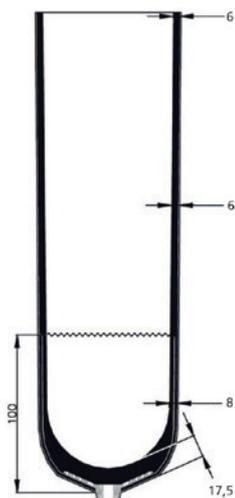

Medidas	Espesor de la pared	Matriz exterior	Conexión distal	Referencia
18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	6 mm	10 cm	con	41L10/...
18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	6 mm	sin	sin	41L20/...

Ejemplo de pedido: 41L10/18 = con conexión distal, med. 18. Suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en ese tamaño o una talla más pequeña.

Gesamtlänge: ca. 370 mm





ClassicSil.basic

Liner de silicona estable de 3 mm



Uso


- grado de movilidad (Walky): 2 a 4
- muy adecuado para asistencia estándar
- para usuarios con sensibilidad normal a la presión y con suficiente cobertura de tejido blando
- "multi uso"

Características

- de silicona especialmente extra fuerte de 3 mm
- comodidad óptima y agradable amortiguación
- tejido de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado del liner
- matriz externa distal con tejido de punto de 10 cm, reduce el trazo distal
- franja vertical tejida en la parte delantera para una mejor orientación al vestirse
- el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
- disponible con conexión distal y control de rotación para todos los tipos de Pin o sistemas de cierre de Streifeneder
- disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación para la técnica de vacío para encaje (VST)

Material

- espesor de pared: 3 mm, ver croquis
- silicona médica especialmente fuerte, tratamiento antibacteriano
- aprox. 40 Shore 00
- funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
- silicona control de rotación distal
- color: gris argentado

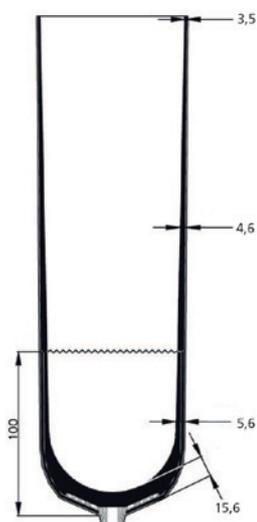

Medidas	Espesor de la pared	Matriz exterior	Conexión distal	Referencia
16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	10 cm	con	50L10/...
16, 18, 20, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	sin	sin	50L20/...

Ejemplo de pedido: 50L10/16 = con conexión distal, med. 16. Suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en ese tamaño o una talla más pequeña.

Gesamtlänge: ca. 370 mm





AK-Control.Sil

Liner de silicona de resistencia media para el muslo, con conexión distal, matriz exterior con bandas de silicona para reducir el alargamiento

Uso

:

- grado de movilidad (Walky): 1 a 4
- ideal para el tratamiento con liner de amputaciones transfemorales y para el tratamiento de amputaciones transtibiales voluminosas

Características

- espesor de la pared de 2 mm para una extensión controlada en la zona de entrada del encaje
- tejido liso de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado del liner
- matriz exterior como banda vertical para la reducción de la tensión longitudinal
- bandas anti-rotación de silicona en la matriz exterior impiden la rotación entre el liner y el encaje de la prótesis
- el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
- muy buena propiedad de extensibilidad radial, se adapta al cambio de volumen del muñón
- disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre de Streifeneder

Material

- espesor de pared: 2 mm, ver croquis
- silicona médica de resistencia media, tratamiento antibacteriano
- aprox. 50 Shore 00
- funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
- tres filas de bandas de silicona en orientación vertical para la reducción de la tensión longitudinal
- silicona control de rotación distal
- color: gris argenteado



Medidas	Espesor de la pared	Referencia
25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55	2 mm	60L10/...

Ejemplo de pedido: 60L10/25 = med. 25. Suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en ese tamaño o una talla más pequeña.



Gesamtlänge: ca. 370 mm





AK-Control.Sil

Liner de silicona de resistencia media para el muslo, con conexión distal, matriz exterior sin bandas de silicona para reducir el alargamiento

Uso

- grado de movilidad (Walky): 1 a 4
- ideal para el tratamiento con liner de amputaciones transfemorales y para el tratamiento de amputaciones transtibiales voluminosas

Características

- espesor de la pared de 2 mm para una extensión controlada en la zona de entrada del encaje
- tejido liso de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado del liner
- matriz exterior como banda vertical para la reducción de la tensión longitudinal
- el control de rotación distal favorece a la conducción de la prótesis de pierna
- muy buena propiedad de extensibilidad radial, se adapta al cambio de volumen del muñón
- disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre de Streifeneder

Material


- espesor de pared: 2 mm, ver croquis
- silicona médica de resistencia media, tratamiento antibacteriano
- aprox. 50 Shore 00
- funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión reducción de la tensión longitudinal
- silicona control de rotación distal
- color: gris argentado



Medidas	Espesor de la pared	Referencia
25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55	2 mm	60L50

Ejemplo de pedido: 60L50/25 = med. 25. Suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en ese tamaño o una talla más pequeña.

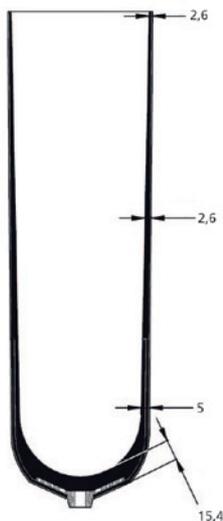

Longitud total: aprox. 370 mm





Control4Sil.basic

Liner transfemoral con bordes de obturación de silicona, forma cilíndrica



Uso

- grado de movilidad (Walky): 1 a 4
- apto exclusivamente para la técnica de vacío para encaje (VST)
- ideal para el tratamiento con liner de amputaciones transfemorales y para el tratamiento de amputaciones transtibiales voluminosas

Características

- 4 bordes de obturación garantizan una adhesión segura en un sistema de vacío
- el recubrimiento deslizante de la superficie facilita la colocación y extracción del liner
- liner de forma cilíndrica
- fácil de limpiar, por lo que también es adecuado para su uso en zonas húmedas
- la matriz interna en toda su longitud evita la elongación y el desenrollado del liner hacia el exterior

Material


- silicona resistente al desgarro, aprox. 40 Shore 00
- espesor de pared: aprox. 2 mm, ver croquis
- matriz interna
- revestimiento deslizante exterior
- capuchón distal de silicona
- color: translúcido

Medidas	Forma del liner	Referencia
26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50	cilíndrico	65S1/...

Ejemplo de pedido 65S1/26,5 = med. 26,5. Suministro incluye tendedor.



Elección de la talla: mida la circunferencia del muñón 4 cm por encima del extremo del muñón. Fíjese en cualquier saliente de tejido blando.

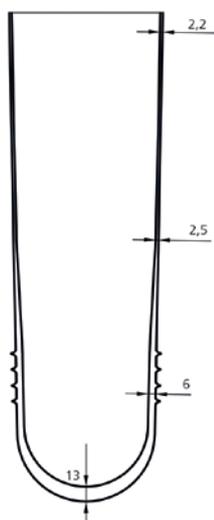



Control4Sil.conic

Liner transfemoral con bordes de obturación de silicona, forma cónica

Uso

- grado de movilidad (Walky): 1 a 4
- apto exclusivamente para la técnica de vacío para encaje (VST)
- ideal para el tratamiento con liner de amputaciones transfemorales y para el tratamiento de amputaciones transtibiales voluminosas

Características

- 4 bordes de obturación garantizan una adhesión segura en un sistema de vacío
- el recubrimiento deslizante de la superficie facilita la colocación y extracción del liner
- liner de forma cónica
- fácil de limpiar, por lo que también es adecuado para su uso en zonas húmedas
- la matriz interna en toda su longitud evita la elongación y el desenrollado del liner hacia el exterior

Material

- silicona resistente al desgarro, aprox. 40 Shore 00
- espesor de pared: aprox. 2 mm, ver croquis
- matriz interna
- revestimiento deslizante exterior
- capuchón distal de silicona
- color: translúcido




Medidas	Forma del liner	Referencia
25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	cónico	65S5/...

Ejemplo de pedido 65S5/26,5 = med. 26,5. Suministro incluye tendedor.



Elección de la talla: mida la circunferencia del muñón 4 cm por encima del extremo del muñón. Fijese en cualquier saliente de tejido blando.

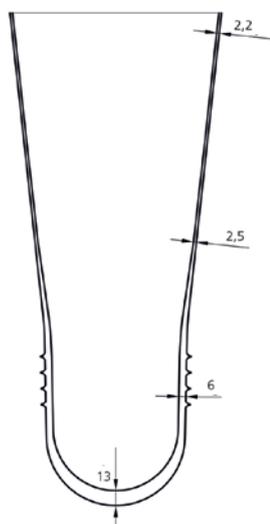



ContexGel.basic

Liner ContexGel, 3 mm uniforme, ContexGel blando



Uso


- grado de movilidad (Walky): 1 a 3
- apto para la prototización de amputaciones transfemorales y transtibiales
- adecuado para la sustitución de tejidos blandos en el extremo distal del muñón
- para muñones difíciles, huesudos o sensibles a la presión

Características

- moldeable termoplásticamente a 60 °C
- comodidad óptima y una buena amortiguación en todo el muñón
- revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado del liner
- excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón
- el control de rotación distal apoya la guía de la prótesis de pierna (20L10)
- disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre de Streifeneder
- disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para encaje (VST)

Material

- espesor de la pared: 3 mm uniforme, forma cónica
- ContexGel suave con aceite medicinal blanco, antibacteriano
- aprox. 25 - 30 Shore 00
- tejido de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
- control de rotación PUR (tapa) para artículo 20L10
- color: antracita/jaspeado

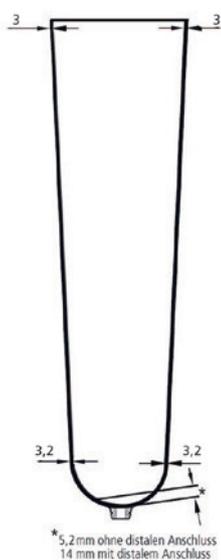

longitud total: aprox. 430 mm

Medidas	Distal	Proximal	Conexión distal	Referencia
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	con	20L10/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	con	20L10/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	con	20L10/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	con	20L10/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	con	20L10/XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	sin	20L20/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	sin	20L20/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	sin	20L20/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	sin	20L20/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	sin	20L20/XXL

El suministro incluye tendedor.


Elección de la talla: mida la circunferencia distal aprox. 4 cm y 30 cm (proximal) por encima del extremo final del muñón y seleccione en el cuadro de tallas, la talla del liner de acuerdo al contorno proximal y distal del muñón. Tenga en cuenta que para tratamiento de muñones transtibiales con el liner ContexGel sin conexión distal es necesario una rodillera ContexGel.sleeve.





ContexGel.basic

Liner ContexGel, 3 mm uniforme, de ContexGel blando, con matriz exterior

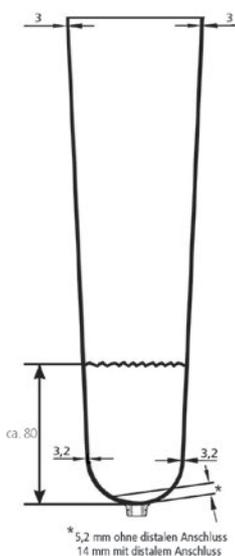

longitud total: aprox. 430 mm

Uso

- grado de movilidad (Walky): 1 a 3
- apto para la protetización de amputaciones transfemorales y transtibiales
- adecuado para la sustitución de tejidos blandos en el extremo distal del muñón
- para muñones difíciles, huesudos o sensibles a la presión

Características

- moldeable termoplásticamente a 60 °C
- comodidad óptima y una buena amortiguación en todo el muñón
- revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado del liner
- matriz exterior integrada en el área distal para reducir el alargamiento distal
- excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón
- el control de rotación distal favorece a la conducción de la prótesis de pierna
- disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre de Streifeneder

Material

- espesor de la pared: 3 mm uniforme, forma cónica
- ContexGel suave con aceite medicinal blanco, antibacteriano
- aprox. 25 - 30 Shore 00
- tejido de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
- control de rotación PUR (tapa) para artículo 25L10
- color: antracita/jaspeado

Medidas	Distal	Proximal	Conexión distal	Referencia
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	con	25L10/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	con	25L10/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	con	25L10/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	con	25L10/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	con	25L10/XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	sin	25L20/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	sin	25L20/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	sin	25L20/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	sin	25L20/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	sin	25L20/XXL

El suministro incluye tendedor.



Elección de la talla: mida la circunferencia distal aprox. 4 cm y 30 cm (proximal) por encima del extremo final del muñón y seleccione en el cuadro de tallas, la talla del liner de acuerdo al contorno proximal y distal del muñón. Tenga en cuenta que para tratamiento de muñones transtibiales con el liner ContexGel sin conexión distal es necesario una rodillera ContexGel.sleeve.





ContexGel.soft

Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 6 mm, posterior 3 mm, ContexGel suave

Uso

- grado de movilidad (Walky): 1 a 3
- para la protetización de amputaciones transtibiales
- para la sustitución de tejidos blandos en la parte frontal de la espinilla y en el extremo distal del muñón
- muñones transtibiales difíciles, huesudos

Características

- moldeable termoplásticamente a 60 °C
- comodidad óptima y una muy buena amortiguación en la parte frontal del muñón
- revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado del liner
- paredes delgadas en el área posterior dorsal facilita la flexión de la rodilla en el encaje de la prótesis
- excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón
- el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
- disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre de Streifeneder
- disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para encaje (VST)

Material

- espesor de la pared: 6 mm frontal, 3 mm dorsal, forma cónica
- ContexGel suave con aceite medicinal blanco, antibacteriano
- aprox. 25 - 30 Shore 00
- tejido de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
- control de rotación PUR (tapa) para artículo 21L10
- color: antracita/jaspeado



longitud total: aprox. 430 mm

Medidas	Distal	Proximal	Conexión distal	Referencia
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	con	21L10/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	con	21L10/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	con	21L10/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	con	21L10/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	con	21L10/XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	sin	21L20/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	sin	21L20/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	sin	21L20/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	sin	21L20/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	sin	21L20/XXL

El suministro incluye tendedor.


Elección de la talla: mida la circunferencia distal aprox. 4 cm y 30 cm (proximal) por encima del extremo final del muñón y seleccione en el cuadro de tallas, la talla del liner de acuerdo al contorno proximal y distal del muñón. Tenga en cuenta que para tratamiento de muñones transtibiales con el liner ContexGel sin conexión distal es necesario una rodillera ContexGel.sleeve.





ContexGel.soft

Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 6 mm, posterior 3 mm, ContexGel suave, con matriz exterior

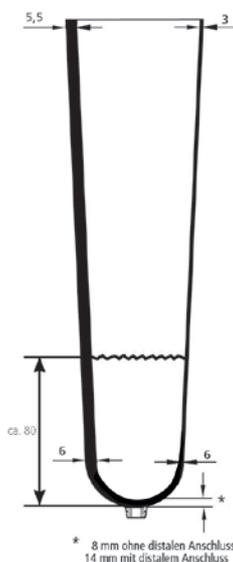

l
ongitud total: aprox. 430 mm

Uso

- grado de movilidad (Walky): 1 a 3
- para la protetización de amputaciones transtibiales
- para la sustitución de tejidos blandos en la parte frontal de la espinilla y en el extremo distal del muñón
- muñones transtibiales difíciles, huesudos

Características

- moldeable termoplásticamente a 60 °C
- comodidad óptima y una muy buena amortiguación en la parte frontal del muñón
- revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado del liner
- matriz exterior integrada en la zona distal para reducir la carrera longitudinal
- paredes delgadas en el área posterior distal facilita la flexión de la rodilla en el encaje de la prótesis
- excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón
- el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
- disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre de Streifeneder
- disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para encaje (VST)

Material

- espesor de la pared: 6 mm frontal, 3 mm dorsal, forma cónica
- ContexGel suave con aceite medicinal blanco, antibacteriano
- aprox. 25 - 30 Shore 00
- tejido de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
- control de rotación PUR (tapa) para artículo 26L10
- color: antracita/jaspeado

Medidas	Distal	Proximal	Conexión distal	Referencia
🌊 S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	con	26L10/S
🌊 M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	con	26L10/M
🌊 L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	con	26L10/L
🌊 XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	con	26L10/XL
🌊 XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	con	26L10/XXL
🌊 S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	sin	26L20/S
🌊 M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	sin	26L20/M
🌊 L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	sin	26L20/L
🌊 XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	sin	26L20/XL
🌊 XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	sin	26L20/XXL

El suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aprox. 4 cm y 30 cm (proximal) por encima del extremo final del muñón y seleccione en el cuadro de tallas, la talla del liner de acuerdo al contorno proximal y distal del muñón. Tenga en cuenta que para tratamiento de muñones transtibiales con el liner ContexGel sin conexión distal es necesario una rodillera ContexGel.sleeve.





ContexGel.soft+

Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 9 mm, posterior 3 mm, ContexGel suave

Uso


- grado de movilidad (Walky): 1 a 3
- para la protézización de amputaciones transtibiales
- para la sustitución de tejidos blandos en la parte frontal de la espinilla y en el extremo distal del muñón
- apropiado para muñones transtibiales difíciles, huesudos o sensibles a la presión

Características

- moldeable termoplásticamente a 60 °C
- comodidad óptima y una excelente amortiguación en la parte frontal del muñón
- revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado del liner
- espesor de pared más fino en la zona dorsal que facilita la flexión de la rodilla en el encaje protésico
- excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón
- el control de rotación distal favorece a la conducción de la prótesis de pierna
- disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre de Streifeneder
- disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para encaje (VST)

Material

- espesor de la pared: 9 mm frontal, 3 mm dorsal, forma cónica
- ContexGel suave con aceite medicinal blanco, antibacteriano
- aprox. 25 - 30 Shore 00
- tejido de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
- control de rotación PUR (tapa) para artículo 22L10
- color: antracita/jaspeado

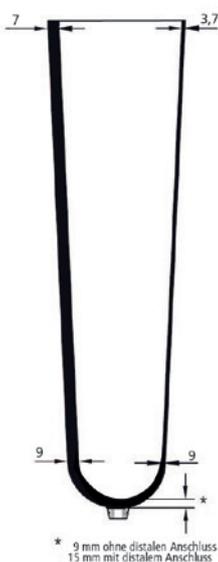

longitud total: aprox. 430 mm

Medidas	Distal	Proximal	Conexión distal	Referencia
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	con	22L10/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	con	22L10/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	con	22L10/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	con	22L10/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	con	22L10/XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	sin	22L20/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	sin	22L20/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	sin	22L20/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	sin	22L20/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	sin	22L20/XXL

El suministro incluye tendedor.


Elección de la talla: mida la circunferencia distal aprox. 4 cm y 30 cm (proximal) por encima del extremo final del muñón y seleccione en el cuadro de tallas, la talla del liner de acuerdo al contorno proximal y distal del muñón. Tenga en cuenta que para tratamiento de muñones transtibiales con el liner ContexGel sin conexión distal es necesario una rodillera ContexGel.sleeve.





ContexGel.soft+

Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 9 mm, posterior 3 mm, ContexGel suave, con matriz exterior

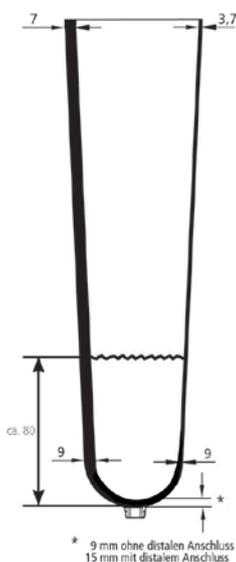

longitud total: aprox. 430 mm

Uso

- grado de movilidad (Walky): 1 a 3
- para la protetización de amputaciones transtibiales
- para la sustitución de tejidos blandos en la parte frontal de la espinilla y en el extremo distal del muñón
- apropiado para muñones transtibiales difíciles, huesudos o sensibles a la presión

Características

- moldeable termoplásticamente a 60 °C
- comodidad óptima y una excelente amortiguación en la parte frontal del muñón
- revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado del liner
- matriz exterior integrada en la zona distal para reducir la carrera longitudinal
- paredes delgadas en el área posterior dorsal facilita la flexión de la rodilla en el encaje de la prótesis
- excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón
- el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
- disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre de Streifeneder
- disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para encaje (VST)

Material

- espesor de la pared: 9 mm frontal, 3 mm dorsal, forma cónica
- ContexGel blando con aceite medicinal blanco, antibacteriano
- aprox. 25 - 30 Shore 00
- tejido de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
- control de rotación PUR (tapa) para artículo 27L10
- color: antracita/jaspeado

Medidas	Distal	Proximal	Conexión distal	Referencia
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	con	27L10/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	con	27L10/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	con	27L10/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	con	27L10/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	con	27L10/XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	sin	27L20/S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	sin	27L20/M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	sin	27L20/L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	sin	27L20/XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	sin	27L20/XXL

El suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aprox. 4 cm y 30 cm (proximal) por encima del extremo final del muñón y seleccione en el cuadro de tallas, la talla del liner de acuerdo al contorno proximal y distal del muñón. Tenga en cuenta que para tratamiento de muñones transtibiales con el liner ContexGel sin conexión distal es necesario una rodillera ContexGel.sleeve.





ContexGel.protect

Funda protectora para la rodillera ContexGel.sleeve



Uso

- funda protectora para cubrir los bordes afilados del encaje de la prótesis

Características

- la funda protectora expansible evita el desgaste prematuro de las rodilleras ContexGel
- la funda protectora se sitúa por debajo de la rodillera ContexGel
- la superficie interior distal está provista de un borde de silicona, que evita su desplazamiento en el encaje de la prótesis
- una adhesión adicional no es necesaria

Material

- tejido funcional resistente y extensible de poliuretano / poliamida / elastano
- color: negro

Medidas	Lado	para Rodillera	Largo	Referencia
S	universal	med. S	19 cm	3S50/S
M	universal	med. M	19 cm	3S50/M
L	universal	med. L	22 cm	3S50/L
XL	universal	medidas XL + XXL	22 cm	3S50/XL



ContexGel.sleeve

Rodillera ContexGel, 3 mm uniforme, cónica



Uso

- la rodillera ContexGel puede ser usada en la prótesis transtibial como vendaje de sujeción o como caperuza de obturación en la técnica de vacío para encaje (VST)
- apoyo y estabilización de la rodilla adicional en prótesis cortas
- tallas pequeñas se usan en la prótesis de brazo como vendaje de sujeción

Características

- moldeable termoplásticamente a 60 °C
- en la zona de la articulación de la rodilla tejido satén que evita la sensación de tensión
- para una adherencia óptima en las regiones proximal y distal
- funda de punto de una sola pieza lisa para un fácil enrollado y desenrollado del liner
- minimización de la expansión longitudinal a través de la matriz externa en el área distal y proximal
- excelente expansión circular, se adapta al encaje y a la anatomía del usuario
- recomendado también para la técnica de vacío para encaje (VST)

Material

- espesor de la pared: 3 mm uniforme, forma cónica
- ContexGel suave con aceite medicinal blanco, antibacteriano
- funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
- aprox. 25 - 30 Shore 00
- color: antracita/jaspeado 30L10 / color arena 30L50

Color: antracita/jaspeado

Medidas	Distal	Proximal	Largo	Referencia
S	15 – 23 cm	23 – 35 cm	37 cm	30L10/S
M	21 – 31 cm	29 – 44 cm	37 cm	30L10/M
L	28 – 43 cm	36 – 52 cm	38,5 cm	30L10/L
XL	34 – 48 cm	42 – 58 cm	38,5 cm	30L10/XL
XXL	38 – 52 cm	43 – 64 cm	38,5 cm	30L10/XXL
XXXL	42 – 56 cm	50 – 70 cm	38,5 cm	30L10/XXXL

Color: color arena

Medidas	Distal	Proximal	Largo	Referencia
S	15 – 23 cm	23 – 35 cm	37 cm	30L50/S
M	21 – 31 cm	29 – 44 cm	37 cm	30L50/M
L	28 – 43 cm	36 – 52 cm	38,5 cm	30L50/L
XL	34 – 48 cm	42 – 58 cm	38,5 cm	30L50/XL
XXL	38 – 52 cm	43 – 64 cm	38,5 cm	30L50/XXL
XXXL	42 – 56 cm	50 – 70 cm	38,5 cm	30L50/XXXL

S Selección de tallas: 6 med. de rodilleras ContexGel a elegir. La rodillera de ser posible, debe ser alineada centralmente con la articulación de la rodilla. El tamaño requerido para la rodillera ContexGel está dado, distal por circunferencia del encaje y proximal (aprox. 15 cm por encima del centro de la rodilla) por la circunferencia del muslo.



AK-Suspender

Correa de sujeción para prótesis transfemoral



suministro sin elementos de prótesis

Uso

- asegurar una prótesis a la pelvis del usuario y evita el deslizamiento de la prótesis del muñón
- el correa se usa como reforzamiento de la prótesis transfemoral con encaje de succión, cuando no se puede formar vacío suficiente

Características

- facilita la colocación y favorece una mejor orientación durante el uso de una prótesis transfemoral sin válvula de descarga o sistema de revestimiento
- neopreno elástico antideslizante en el lado interior a la altura del muslo, se adhiere al encaje
- tejido resistente, con estiramiento transversal reforzado en el área de la pelvis/cadera, se adapta perfectamente a la forma del cuerpo
- ajuste individual mediante dos cierres frontales autoadherentes (gancho/bucle)

Material

- parte de la pierna: 100 % neopreno (caucho celular), recubrimiento exterior textil: 100 % poliamida (PA)
- parte de la pelvis: 46 % poliamida (PA), el 30 % de viscosa (CV), 24 % elastán (EL)
- color: plateado/antracita
- lavable a máquina a 30 °C

Medidas	Contorno de cadera	Contorno medial / borde del encaje	Lado	Referencia
S	60 - 74 cm	36 - 40 cm	derecho	300A1/RS
M	66 - 80 cm	40 - 44 cm	derecho	300A1/RM
L	76 - 90 cm	44 - 48 cm	derecho	300A1/RL
XL	86 - 100 cm	48 - 52 cm	derecho	300A1/RXL
XXL	96 - 110 cm	52 - 56 cm	derecho	300A1/RXXL
S	60 - 74 cm	36 - 40 cm	izquierdo	300A1/LS
M	66 - 80 cm	40 - 44 cm	izquierdo	300A1/LM
L	76 - 90 cm	44 - 48 cm	izquierdo	300A1/LL
XL	86 - 100 cm	48 - 52 cm	izquierdo	300A1/LXL
XXL	96 - 110 cm	52 - 56 cm	izquierdo	300A1/LXXL



BK-Suspender

Correa tejida para prótesis transtibial



suministro sin elementos de prótesis

Uso

- fijación adicional de la prótesis transtibial a la pierna, evitando de este modo un deslizamiento de la prótesis del muñón
- favorece a la orientación de la prótesis
- apoya y descarga la cápsula de la articulación de la rodilla, al usar una prótesis corta

Características

- alta elasticidad circular, apenas elasticidad vertical
- forma anatómica flexible

Material

- 75 % poliamida PA, 25 % elastano EL (sin látex)
- color: plata/antracita 23A1 / color carne 24A1

Unidad de venta: 2 piezas

Medidas	Contorno distal	Contorno proximal	Largo	Referencia
S	26 - 30 cm	34 - 38 cm	35 cm	23A1/S
M	29 - 33 cm	38 - 42 cm	35 cm	23A1/M
L	32 - 36 cm	42 - 46 cm	35 cm	23A1/L
XL	35 - 39 cm	46 - 50 cm	35 cm	23A1/XL

color: carne

Medidas	Contorno distal	Contorno proximal	Largo	Referencia
S	26 - 30 cm	34 - 38 cm	35 cm	24A1/S
M	29 - 33 cm	38 - 42 cm	35 cm	24A1/M
L	32 - 36 cm	42 - 46 cm	35 cm	24A1/L
XL	35 - 39 cm	46 - 50 cm	35 cm	24A1/XL

Puede ser utilizado para el lado derecho e izquierdo.



Slide.fit

Medio auxiliar de colocación para prótesis transfemorales

Uso

- medio auxiliar de colocación para usuarios de prótesis transfemorales con encaje de succión


Características

- debido a la superficie deslizante del medio auxiliar de colocación, se facilita la aplicación de la prótesis transfemoral
- la larga lengüeta rigidizada ayuda al enhebrado a través del orificio de la válvula en el encaje de la prótesis
- la lengüeta larga facilita la extracción a través del orificio de la válvula
- respunteado de diferentes colores para identificar las tallas

Material

- material: 100 % poliamida
- recubrimiento: 100 % PUR poliuretano

Unidad de venta : 1 pieza incl. bolsa de almacenamiento

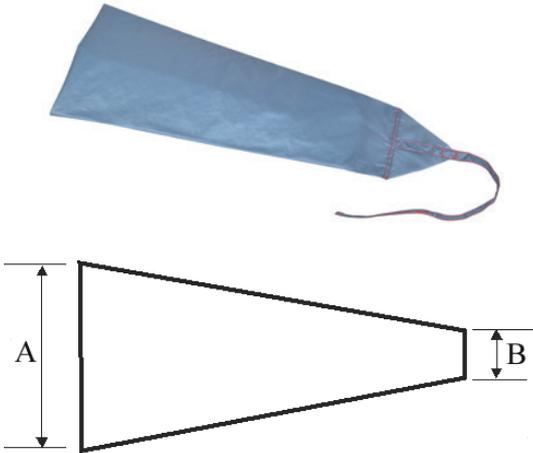

Contorno muñón distal hasta (B)	Contorno muñón proximal hasta (A)	Largo del medio auxiliar de colocación	Color	Referencia
24 cm	40 cm	43 cm	amarillo	17A1/XS
26 cm	44 cm	50 cm	rojo	17A1/S
28 cm	56 cm	50 cm	azul oscuro	17A1/M
30 cm	68 cm	50 cm	verde	17A1/L
36 cm	76 cm	52 cm	azul claro	17A1/XL
38 cm	88 cm	60 cm	naranja	17A1/XXL



DAW-Slipper

Medio auxiliar de colocación para prótesis transfemorales



Uso

- medio auxiliar de colocación para usuarios de prótesis transfemorales con encaje de succión

Características

- debido a la superficie lisa del medio auxiliar de colocación, la aplicación de la prótesis transfemoral se simplifica
- el lazo de 80 cm ayuda al enhebrado y extracción a través del orificio de la válvula
- nylon de calidad muy duradera con el extremo distal reforzado
- producto original de DAW

Material

- 100 % poliamida (nylon), color: blanco
- muy buena calidad de punto, suave, lisa
- técnica de tejido anti acarralado
- lavable a máquina a 30 °C

Contorno de muslo	Largo	Referencia
26 - 32 cm	50 cm	13A2/1
33 - 40 cm	50 cm	13A2/2
41 - 50 cm	50 cm	13A2/3
51 - 60 cm	50 cm	13A2/4
61 - 70 cm	50 cm	13A2/5

 Para determinar el tamaño, medir el contorno del muslo en el extremo superior de la prótesis.

Streifycone para Soft-Socket

Uso


- cono prefabricado con tapón en el extremo distal, para la fabricación con ahorro de tiempo de encajes interiores de paredes suaves (Soft-Sockets)

Características

- Streifyfoam (polietileno suave expandido) se puede moldear termoplásticamente de manera óptima a 130 °C
- no encoge, tiene una muy buena fuerza de retorno y se puede limpiar fácilmente con jabón de pH neutro

Material

- espuma de células cerradas, y por lo tanto, higiénico y agradable a la piel
- espesor del material: 5 mm, Shore A 35 a 40
- altura: 425 mm para todas las tallas

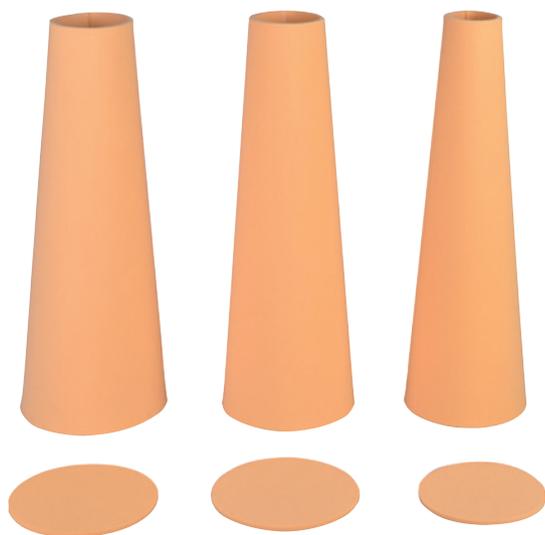

Contorno distal	Contorno proximal	Ø Tapa extremo distal	Medidas	Referencia
190 mm	390 mm	116 mm	S	6S1/S
230 mm	420 mm	136 mm	M	6S1/M
260 mm	470 mm	136 mm	L	6S1/L

 Calentar a una temperatura de 130 °C aprox. de 10 a 15 min. en un horno de rayos infrarrojos (50M25) o en un armario térmico (50M4) para finalmente tirar de él sobre el modelo de escayola seco. Usar el adhesivo rápido Forte (118P13) para pegar la tapa del extremo distal.



Producto para el cuidado del muñón - PC30V

- crema para el cuidado de la piel, de uso externo, para usuarios de prótesis así como de otros aparatos ortopédicos y accesorios
- previene zonas de presión y roce
- cuida y fortalece la piel
- aplicable para profilaxis de úlceras de decúbito
- libre de sustancias irritantes para la piel

Unidad de venta: 1 botella con tapa de rosca

Contenido	Referencia
100 ml	10H1/100
250 ml	10H1/250



Skin-Care -Loción limpiadora-

- Loción de lavado para la limpieza de la piel y los liner de los muñones, así como de las prótesis y órtesis
- inodoro (sin perfume)
- probado dermatológicamente
- antibacteriano

Unidad de venta: = 1 botella con atomizador

Contenido	Referencia
300 ml	10H2



Skin Care - Crema protectora de la piel

- crea una película protectora eficaz sobre la piel mediante una aplicación fina y uniforme

Unidad de venta: 1 botella con tapa abatible

Contenido	Referencia
100 ml	10H3



Skin Care - Loción hidratante



- cuida y regenera la piel seca y estropeada
- protege de la presión y fricción
- calma las irritaciones de la piel
- reduce el sudor y la formación de olores
- reduce el picor de la piel gracias al ingrediente polidocanol (3 %)

Unidad de venta: 1 botella con tapa abatible

Contenido	Referencia
200 ml	10H4



Skin Care - Spay medio auxiliar de colocación



- medio auxiliar de colocación silicona, ayuda a ponerse el liner sin funda textil
- mediante el spray se consigue una capa deslizante en el liner de silicona
- hace posible un fácil enrollado y desenrollado del Liner
- se obtiene una adherencia óptima mediante una salida rápida del aire

Unidad de venta: = 1 botella con atomizador

Contenido	Referencia
200 ml	10H5
Botella de recarga 1000 ml	10H5/1



10H5



10H5/1, Nachfüllflasche





Tijeras de corte ondulado

- canto de corte en forma de ondas (1 onda 2 cm)
- apropiadas para el acortamiento y el recorte a medida de liners de silicona y de ContexGel
- el canto del corte no se desgarran durante el alargamiento
- la forma ondulada permite una mejor distribución de las fuerzas circulares cortantes sobre la piel del muñón reduciéndose una posible irritación de la piel

Largo	Referencia
240 mm	166P36

Media para muñón StreifyDerm

Recubrimiento de gel polímero 2 mm

- para la protetización transtibial
- compuesta de tejido de nylon y 2 mm de recubrimiento de gel polímero



Largo gel / med.	Largo muñón	Contorno distal	Contorno proximal	Referencia
20 cm / 1	25 - 34 cm	17 - 24 cm	17 - 26 cm	26A10/1
25 cm / 2	38 - 44 cm	18 - 28 cm	18 - 32 cm	26A10/2
25 cm / 3	38 - 44 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	26A10/3
33 cm / 4	43 - 49 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	26A10/4
25 cm / 5	43 - 49 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	26A10/5
33 cm / 6	46 - 54 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	26A10/6
33 cm / 7	46 - 54 cm	28 - 42 cm	28 - 49 cm	26A10/7
33 cm / 8	46 - 54 cm	31 - 50 cm	31 - 56 cm	26A10/8

Media para muñón StreifyDerm Cushion

Recubrimiento de gel polímero 3 mm

- para la protetización transtibial
- compuesta de tejido de nylon y 3 mm de recubrimiento de gel polímero



Largo gel / med.	Largo muñón	Contorno distal	Contorno proximal	Referencia
20 cm / 1	25 - 34 cm	17 - 24 cm	17 - 26 cm	26A20/1
25 cm / 2	38 - 44 cm	18 - 28 cm	18 - 32 cm	26A20/2
25 cm / 3	38 - 44 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	26A20/3
33 cm / 4	43 - 49 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	26A20/4
25 cm / 5	43 - 49 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	26A20/5
33 cm / 6	46 - 54 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	26A20/6
33 cm / 7	46 - 54 cm	28 - 42 cm	28 - 49 cm	26A20/7
33 cm / 8	46 - 54 cm	31 - 50 cm	31 - 56 cm	26A20/8

Media para muñón StreifyDerm Endurance

dos capas de nylon y 2 mm de gel polímero

- para la protetización transtibial
- compuesto de dos capas de nylon y entre ellos 2 mm de gel polímero




Largo gel / med.	Largo muñón	Contorno distal	Contorno proximal	Referencia
20 cm / 1	25 - 34 cm	17 - 24 cm	17 - 26 cm	26A30/1
25 cm / 2	38 - 44 cm	18 - 28 cm	18 - 32 cm	26A30/2
25 cm / 3	38 - 44 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	26A30/3
33 cm / 4	43 - 49 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	26A30/4
25 cm / 5	43 - 49 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	26A30/5
33 cm / 6	46 - 54 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	26A30/6
33 cm / 7	46 - 54 cm	28 - 42 cm	28 - 49 cm	26A30/7
33 cm / 8	46 - 54 cm	31 - 50 cm	31 - 56 cm	26A30/8



Media de compresión, transtibial

con cinta adhesiva - botones de silicona, antibacteriano

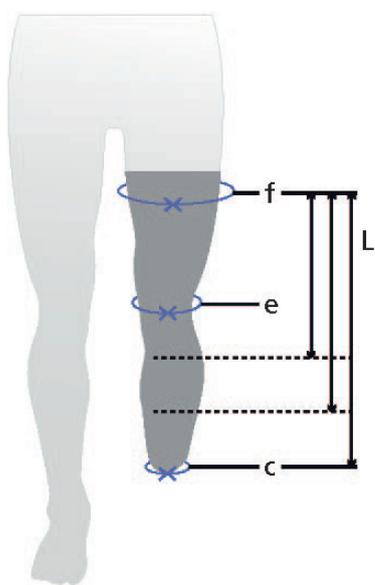

Modo de acción

- terapia de compresión; la clase de compresión será determinada por el médico tratante. Norma Presión de compresión en la clase 1 (suave) 18- 21 mm Hg, (2,4 - 2,8 hPa) en la clase 2 (medio-fuerte) es 23 - 32 mm Hg, (3,1 - 4,3 hPa)

Indicación

- para reducir edemas postoperatorios después de una amputación transtibial
- para la preparación y modelación del muñón de la pierna para la adaptación protésica
- para prevenir edemas después de dejar la prótesis de pierna

Contraindicación

- heridas abiertas
- edemas irreducibles
- Stasisdermatitis, dermatitis crónica transtibial
- enfermedad vascular periférica (EVP)
- Tromboflebitis aguda
- insuficiencia cardíaca congestiva

Material

- género de punto circular, antibacteriano
- 78 % poliamida
- 22 % elastano
- cinta adhesiva - botones de silicona

Medidas	Contorno f	Contorno e	Contorno c	Largo L
XS	41 cm	31 cm	29 cm	30, 38, 46 cm
S	44 cm	34 cm	32 cm	30, 38, 46 cm
M	47 cm	37 cm	35 cm	30, 38, 46 cm
L	50 cm	40 cm	38 cm	30, 38, 46 cm
XL	53 cm	43 cm	41 cm	30, 38, 46 cm
XXL	56 cm	46 cm	44 cm	30, 38, 46 cm

Comp. clase 1: 452A1 + med. + largo / Comp. clase 2: 452A2 + med. + largo

Ejemplo de pedido: 452A1/XS30 = compresión clase 1, med. XS, largo 30 cm




Utilice la tabla contenida en las instrucciones de uso para documentar el volumen.





Media de compresión, transfemoral

con fijación de cadera, antibacteriano

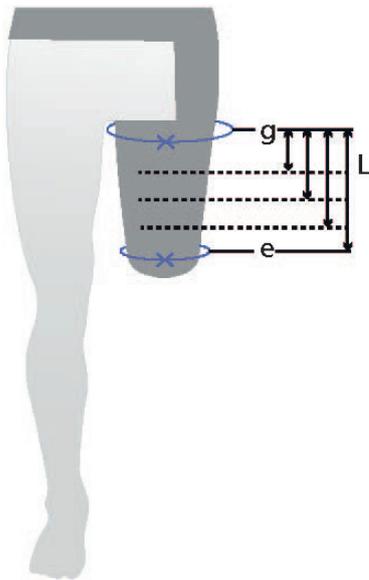

Modo de acción

- terapia de compresión; la clase de compresión será determinada por el médico tratante. Norma Presión de compresión en la clase 1 (suave) 18- 21 mm Hg, (2,4 - 2,8 hPa) en la clase 2 (medio-fuerte) es 23 - 32 mm Hg, (3,1 - 4,3 hPa)

Indicación

- para reducir edemas postoperatorios después de una amputación transfemoral
- para la preparación y modelación del muñón de la pierna para la adaptación protésica
- para prevenir edemas después de dejar la prótesis de pierna

Contraindicación

- heridas abiertas
- edemas irreducibles
- Stasisdermatitis, dermatitis crónica transtibial
- enfermedad vascular periférica (EVP)
- Tromboflebitis aguda
- insuficiencia cardíaca congestiva

Material

- género de punto circular, antibacteriano
- 78 % poliamida
- 22 % elastano

Medidas	Contorno g	Contorno e	Largo L
XS	44 cm	31 cm	20, 25, 30, 35 cm
S	48 cm	34 cm	20, 25, 30, 35 cm
M	52 cm	37 cm	20, 25, 30, 35 cm
L	56 cm	40 cm	20, 25, 30, 35 cm
XL	60 cm	43 cm	20, 25, 30, 35 cm
XXL	64 cm	46 cm	20, 25, 30, 35 cm

Comp. clase 1: 451A1 + med. + largo / Comp. clase 2: 451A2 + med. + largo

Ejemplo de pedido: 451A1/XS20 = clase de compresión 1, med. XS, largo 20 cm

 Utilice la tabla contenida en las instrucciones de uso para documentar el volumen.





DAW-Nylon Funda protectora

Modelo standard, forma universal cónica



Uso

- la media se lleva directamente sobre la piel para mantenerla seca y evitar la fricción, con lo se obtiene una mejor adherencia entre la piel y la prótesis
- compresión óptima del tejido, de este modo se favorece el retorno del flujo sanguíneo y estimula los vasos capilares

Características

- el lado interior es blando y cómodo
- el lado exterior se reconoce por la costura de unión del dobladillo
- el lado exterior liso facilita el ponerse la prótesis respectivamente el uso de medias adicionales


Material

- 100 % poliamida (nylon)
- color: blanco
- muy buena calidad de punto, suave, lisa
- técnica de tejido anti acarralado
- lavable a máquina a 30 °C


Forma	Largo in cm	Referencia
A	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75	25A50/A..
B	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	25A50/B..
C	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75	25A50/C..
D	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65	25A50/D..
E	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50	25A50/E..

Formas

Forma	Contorno muñón*	ancho aprox. proximal x distal funda protectora
A	40-50 cm	15 x 9 cm, 20 x 10 cm
B	50-60 cm	20 x 10 cm
C	sobre 60 cm	25 x 17 cm
D	30-40 cm	25 x 17 cm
E	hasta 30 cm	muñón de brazo

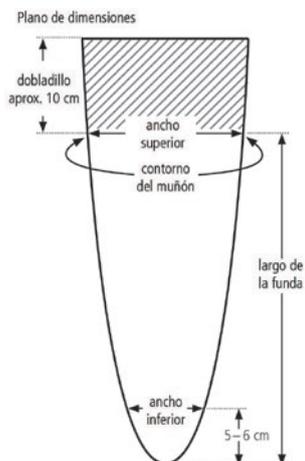

Formas de la funda protectora

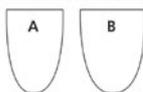

Ejemplo de pedido: 25A50/A20 = forma A, largo 20 cm

S Para el cálculo del tamaño se debe medir el *contorno del muñón transfemoral a la altura del extremo superior de la prótesis. Con la medida obtenida se determina la forma del muñón (A, B, C, D). La longitud de la funda protectora se mide también desde el extremo superior de la prótesis hasta el extremo distal del muñón. Las fundas tienen un dobladillo de aprox. 10 cm, longitud que no se tomará en cuenta.



DAW-Nylon Funda protectora

para desarticulación de rodilla



Uso

- la media se lleva directamente sobre la piel para mantenerla seca y evitar la fricción, con lo se obtiene una mejor adherencia entre la piel y la prótesis
- compresión óptima del tejido, de este modo se favorece el retorno del flujo sanguíneo y estimula los vasos capilares

Características

- el lado interior es blando y cómodo
- el lado exterior se reconoce por la costura de unión del dobladillo
- el lado exterior liso facilita el ponerse la prótesis respectivamente el uso de medias adicionales
- el contorno especial en el extremo distal, se ajusta perfectamente a la forma anatómica del muñón de la rodilla

Material


- 100 % poliamida (nylon)
- color: blanco
- muy buena calidad de punto, suave, lisa
- técnica de tejido anti acarralado
- lavable a máquina a 30 °C

Forma	Contorno muñón	Contorno rodilla	Largo in cm	Referencia
A	hasta 50 cm	hasta 35 cm	40, 45, 50, 55	25A51/A..
B	hasta 60 cm	hasta 35 cm	40, 45, 50, 55	25A51/B..


Ejemplo de pedido: : 25A51/A40 = forma A, largo 40 cm



Para el cálculo del tamaño se debe medir el contorno del muñón transfemoral a la altura del extremo superior de la prótesis. Con la medida obtenida se determina la forma del muñón (A, B). La longitud de la funda protectora se mide también desde el extremo superior de la prótesis hasta el extremo distal del muñón. Las fundas tienen un dobladillo de aprox. 10 cm, longitud que no se tomará en cuenta.

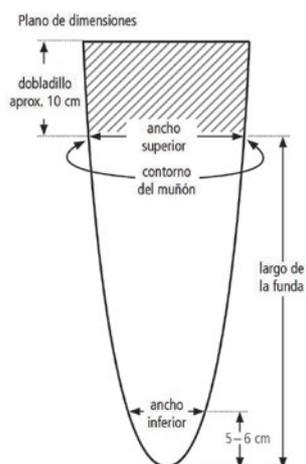


Formas de la funda protectora

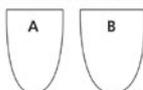



Media de felpa para muñón transtibial

de calidad gruesa, forma recta

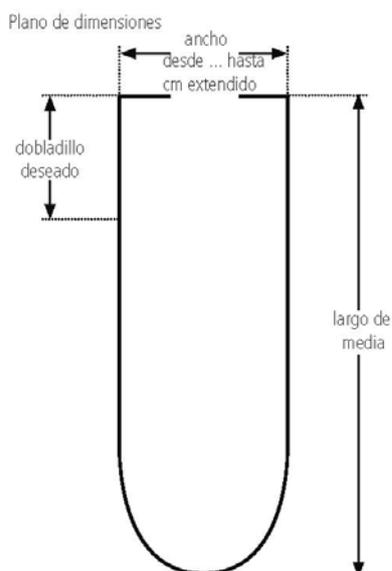

Uso

- especialmente adecuada para compensar los cambios de volumen, por tener lado interior voluminoso de felpa
- modelo con orificio vulcanizado para Pin, referencia 25A10, usar sobre un liner
- modelo sin orificio para Pin, referencia 25A11, se puede usar directamente sobre la piel o sobre una funda protectora (p.ej. referencia 25A50)

Características

- buen confort por tener alto porcentaje de algodón
- por el lado interior de felpa se obtiene un alto efecto de amortiguación y un buen ambiente ya que esta voluminosa construcción puede almacenar una gran cantidad de humedad
- técnica de tejido muy extensible pero no obstante estable de forma


Material

- 85 % algodón, 15 % seda poliamida texturizada (rizado)
- lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm	Color	Con orificio para Pin / Referencia	Sin orificio para Pin / Referencia
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	azul	25A10/.B	25A11/.B
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	verde	25A10/.G	25A11/.G
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	amarillo	25A10/.GB	25A11/.GB
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	color carne	25A10/.H	25A11/.H
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	púrpura	25A10/.L	25A11/.L
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	rojo	25A10/.R	25A11/.R
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	negro	25A10/.S	25A11/.S
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	turquesa	25A10/.T	25A11/.T
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	blanco	25A10/.W	25A11/.W

Ejemplo de pedido: 25A11/20B = sin orificio para Pin, largo 20 cm, color azul. También disponible sobre demanda en los colores verde, amarillo, púrpura o rojo.

S Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de la media. En muñones con un contorno grande la medida de la media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la media de aprox. 10 a 20 cm.

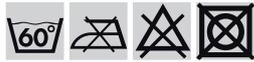

Media de felpa para muñón transtibial

de calidad gruesa, forma recta, parte de lana



Uso

- especialmente adecuada para compensar los cambios de volumen, fibras rizadas generan un tejido voluminoso
- modelo con orificio vulcanizado para Pin, referencia 25A12, usar sobre un liner
- modelo sin orificio para Pin, referencia 25A13, se puede usar directamente sobre la piel o sobre una funda protectora (p.ej. referencia 25A50)

Características

- por el lado interior de felpa se obtiene un alto efecto de amortiguación y un buen ambiente ya que esta voluminosa construcción puede almacenar una gran cantidad de humedad
- buen confort y efecto cálido por su porcentaje en lana
- la forma de la media se adapta durante el tiempo de uso a la forma individual del muñón

Material


- 50 % de lana, 25 % acrílico, 10 % poliamida, el 15 % seda poliamida texturizada (rizada)
- color crudo
- lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm	Modelo	Referencia
25, 35, 40, 45, 55, 65	con orificio para Pin	25A12/..
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65	sin orificio para Pin	25A13/..

Ejemplo de pedido: 25A12/25 = con orificio para Pin, largo 25 cm



Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de la media. En muñones con un contorno grande la medida de la media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la media de aprox. 10 a 20 cm.

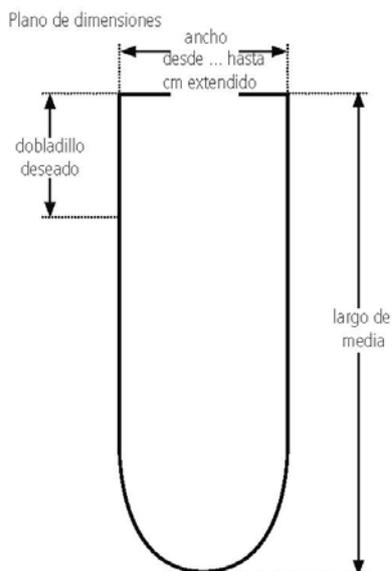



Media de felpa para muñón transtibial

calidad extra gruesa, forma recta, con contenido Lycra®



Uso

- especialmente adecuada para compensar los cambios de volumen, por tener lado interior voluminoso de felpa
- el modelo sin orificio para Pin, se puede usar directamente sobre la piel o sobre un liner
- para mantener la piel seca, se puede usar opcionalmente directamente sobre la piel la funda protectora (referencia 25A50)
- ligero efecto de compresión por contenido de Lycra

Características

- extensibilidad muy alta (más de dos veces del ancho sin estirar) por su parte de Lycra
- muy alta estabilidad de forma, por su parte de Lycra, lo que significa el material regresa siempre a su forma original
- buen confort por tener alto porcentaje de algodón
- por el lado interior de felpa se obtiene un alto efecto de amortiguación y un buen ambiente ya que esta voluminosa construcción puede almacenar una gran cantidad de humedad

Material


- 95 % algodón, 5 % elastano EL(Lycra)
- color: blanco
- lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm	Modelo	Referencia
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75	sin orificio para Pin	25A14/..

Ejemplo de pedido: 25A14/20 = largo 20 cm



Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de la media. En muñones con un contorno grande la medida de la media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la media de aprox. 7,5 a 19 cm.

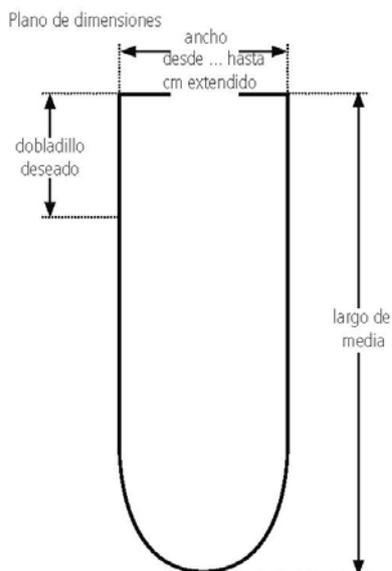



Media de algodón para muñón transtibial

calidad delgada y lisa, forma recta, con alto contenido de elastano



Uso

- modelo con orificio vulcanizado para Pin, referencia 25A20, usar sobre un liner
- modelo sin orificio para Pin, referencia 25A21, se puede usar directamente sobre la piel
- adecuada para compensar los cambios de volumen
- ligero efecto de compresión por su alto contenido de elastano

Características

- muy alta extensibilidad y estabilidad de forma, por su alto contenido de elastano, lo que significa el material regresa siempre a su forma original
- buen confort y tolerancia cutánea por alto porcentaje de algodón

Material

- 85 % algodón, 15 % elastano
- color: blanco
- lavable a máquina hasta 60 °C


Largo in cm	Modelo	Referencia
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	con orificio para Pin	25A20/..
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75	sin orificio para Pin	25A21/..

Ejemplo de pedido: 25A20/20 = con orificio para Pin, largo 20 cm



Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de la media. En muñones con un contorno grande la medida de la media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la media de aprox. 8 a 16 cm.

Plano de dimensiones

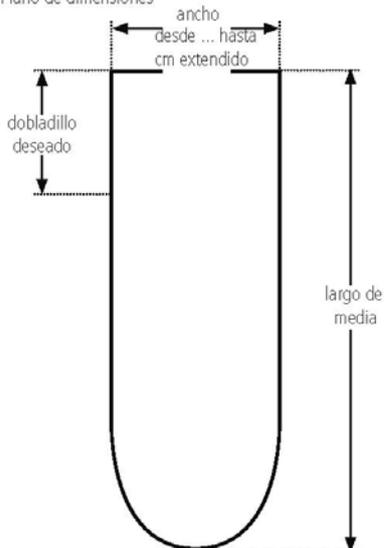



Media de algodón para muñón transtibial

calidad delgada y lisa, forma recta, con contenido de elastano



Uso

- modelo con orificio vulcanizado para Pin, referencia 25A23, usar sobre un liner
- modelo sin orificio para Pin, referencia 25A24, se puede usar directamente sobre la piel
- adecuada para compensar los cambios de volumen
- ligero efecto de compresión por su contenido de elastano

Características

- de extensibilidad y estabilidad de forma muy alta por su alto contenido de elastano, lo que significa el material regresa siempre a su forma original
- buen confort y tolerancia cutánea por alto porcentaje de algodón
- pretina plana de una capa

Material

- 95 % algodón, 5 % elastano
- color crudo
- lavable a máquina hasta 60 °C




Largo in cm	Modelo	Referencia
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55	con orificio para Pin	25A23/..
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	sin orificio para Pin	25A24/..

Ejemplo de pedido: 25A23/20 = con orificio para Pin, largo 20 cm



Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de la media. En muñones con un contorno grande la medida de la media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la media de aprox. 8 a 16 cm.

Plano de dimensiones

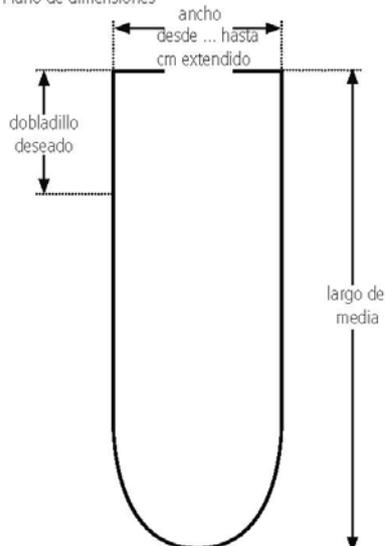



Media de nylon para muñón transtibial

calidad de malla muy fina y delgada, forma recta

Uso

- se lleva sobre el liner, sirve para la protección efectiva del mismo

Características

- orificio vulcanizado para Pin
- el lado interior se reconoce por la costura de unión del dobladillo, la cara lisa del tejido queda hacia afuera

Material

- 100 % nylon, tejido como el de las pantis opacas
- color: blanco
- lavable a máquina hasta 60 °C




Largo in cm	Modelo	Referencia
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55	orificio vulcanizado para Pin	25A31/..

Ejemplo de pedido: 25A31/25 = con orificio vulcanizado para Pin, largo 25 cm



Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de la media. En muñones con un contorno grande la medida de la media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la media de aprox. 11 a 20 cm.

Plano de dimensiones

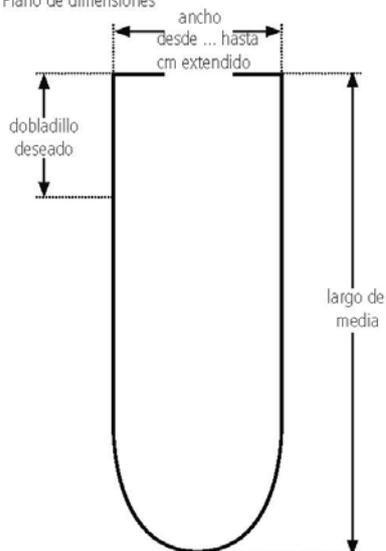



Media de nylon para muñón transtibial

calidad de malla fina y delgada, forma recta, amplio orificio para Pin

Uso

- se lleva sobre el liner, sirve para la protección efectiva del mismo

Características

- el orificio para el Pin mide aprox. Ø 4 cm, formado por una pretina tejida (apropiado p.ej. para KISS® System)
- el lado interior se reconoce por la costura de unión del dobladillo, la cara lisa del tejido queda hacia afuera

Material

- 100 % nylon, tejido como el de las pantis traslúcidas
- color: blanco
- lavable a máquina hasta 60 °C




Largo in cm	Modelo	Referencia
25, 35, 45	con orificio tejido para Pin	20A61/..

Ejemplo de pedido: 20A61/25 = largo 25 cm

S Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de la media. En muñones con un contorno grande la medida de la media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la media de aprox. 10 a 20 cm.

Plano de dimensiones

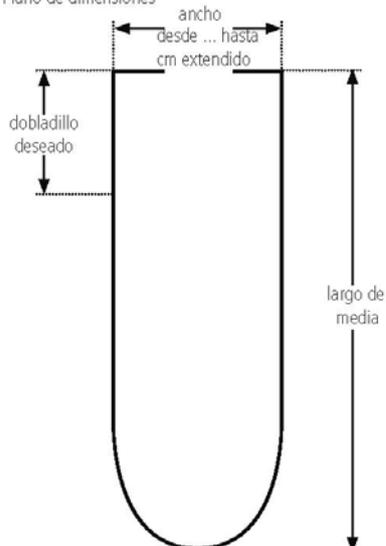



Media de felpa para muñón transfemoral

calidad gruesa, forma cónica



Uso

- especialmente adecuada para compensar los cambios de volumen, por tener lado interior voluminoso de felpa
- modelo con orificio vulcanizado para Pin, referencia 25A15, usar sobre un liner
- modelo sin orificio para Pin, referencia 25A16, se puede usar directamente sobre la piel o sobre una funda protectora (p.ej. referencia 25A50)

Características

- corte cónico, con costura lateral plana
- buen confort por tener alto porcentaje de algodón
- por el lado interior de felpa se obtiene un alto efecto de amortiguación y un buen ambiente ya que esta voluminosa construcción puede almacenar una gran cantidad de humedad
- técnica de tejido extensible pero no obstante estable de forma

Material


- 85 % algodón, 15 % seda poliamida texturizada (rizado)
- color: blanco
- lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm	Modelo	Referencia
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	con orificio para Pin	25A15/..
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	sin orificio para Pin	25A16/..

Ejemplo de pedido: 25A15/20 = con orificio para Pin, largo 20 cm



Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de la media. En muñones con un contorno grande la medida de la media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la media de aprox. 16 a 27 cm.

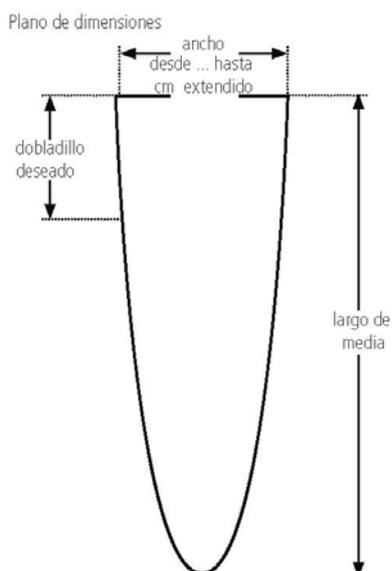



Media de algodón para muñón transfemoral

calidad delgada y lisa, forma cónica, con contenido de elastano



Uso

- orificio vulcanizado para protetizaciones transfemorales con Pin
- se lleva sobre el liner, y sirve para compensar los cambios de volumen

Características

- alta extensibilidad y estabilidad de forma por su contenido de elastano, lo que significa que el material regresa siempre a su forma original
- buen confort y tolerancia cutánea por alto porcentaje de algodón
- pretina plana de una capa
- forma cónica, con costura lateral plana

Material


- 95 % algodón, 5 % elastano
- color crudo
- lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm	Modelo	Referencia
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55	con orificio para Pin	25A25/..



Ejemplo de pedido: 25A25/25 = largo 25 cm

S Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de la media. En muñones con un contorno grande la medida de la media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la media de aprox. 14 a 28 cm.

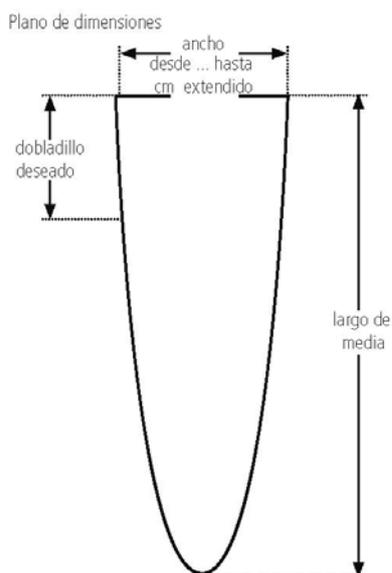



Media de nylon para muñón transfemoral

calidad de malla muy fina y delgada, forma cónica



Uso

- orificio vulcanizado para protetizaciones transfemorales con Pin
- se lleva sobre el liner, sirve para la protección efectiva del mismo

Características

- el lado interior se reconoce por la costura de unión del dobladillo, la cara lisa del tejido queda hacia afuera
- corte cónico, con costura lateral plana

Material

- 100 % nylon, tejido como el de las pantis opacas
- color: blanco
- lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm	Modelo	Referencia
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55	con orificio para Pin	25A35/..


Ejemplo de pedido: 25A35/25 = largo 25 cm



Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de la media. En muñones con un contorno grande la medida de la media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la media de aprox. 19 a 32 cm.



Plano de dimensiones

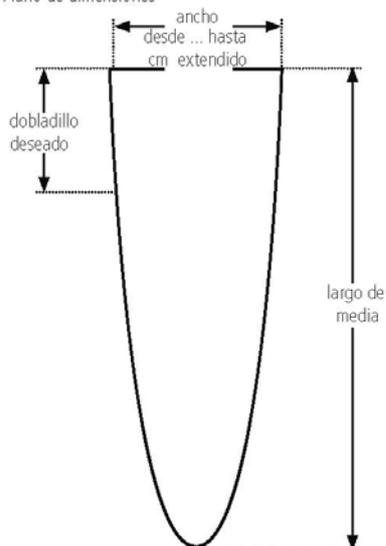



Media de lana para muñón transtibial/transfe- moral

calidad fuerte, 3 hilos, forma cónica



Uso

- adecuada para compensar los cambios de volumen
- confección firme (doblado rosa)
- este modelo sin orificio para Pin, se puede usar directamente sobre la piel
- entre la piel y la media de muñón se usará una funda protectora (p.ej. referencia 25A50)

Características

- buen confort y efecto cálido por su porcentaje en lana
- la forma de la media se adapta durante el tiempo de uso a la forma individual del muñón
- alto efecto de amortiguación y buen ambiente, ya que la lana puede almacenar una gran cantidad de humedad, sin que se sienta húmeda

Material

- 70 % lana, 30 % viscosa
- color crudo
- lavable a máquina a 30 °C

Modelos con orificio para Pin disponibles sobre demanda.





Largo in cm	Forma en cm	Referencia
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75	20 x 10 sin estirar, 25 x 13 estirada	20A74/..

Ejemplo de pedido: 20A74/30 = largo 30 cm

 Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud requerida de la media.

Plano de dimensiones

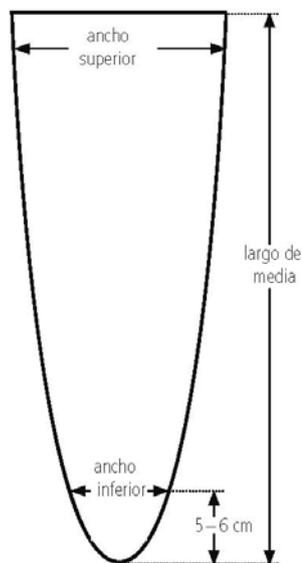

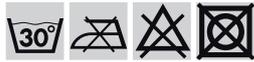

Media de lana para muñón transtibial/transfemorál

calidad media fuerte, 2 hilos, corte cónico

sin foto



Uso

- adecuada para compensar los cambios de volumen
- acabado de densidad media (doblado blanco)
- este modelo sin orificio para Pin, se puede usar directamente sobre la piel
- entre la piel y la media de muñón se usará una funda protectora (p.ej. referencia 25A50)


Características

- buen confort y efecto cálido por su porcentaje en lana
- la forma de la media se adapta durante el tiempo de uso a la forma individual del muñón
- alto efecto de amortiguación y buen ambiente, ya que la lana puede almacenar una gran cantidad de humedad, sin que se sienta húmeda

Material

- 70 % lana, 30 % viscosa
- color crudo
- lavable a máquina a 30 °C

Plano de dimensiones

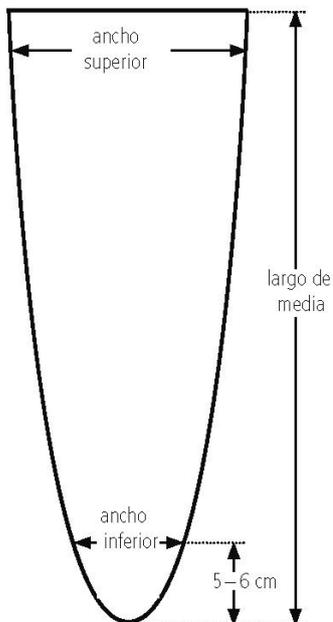

Largo in cm	Forma en cm	Referencia
25, 30, 35, 40, 45, 50	15 x 9 sin estirar, 19 x 12 estirada	20A57/..
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70	20 x 10 sin estirar, 25 x 13 estirada	20A58/..

Ejemplo de pedido: 20A57/25 = largo 25 cm, forma 15 x 9 cm (sin estirar) respectivamente 19 x 12 cm (estirada)

Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud requerida de la media.



Medias de compensación de volumen

de calidad gruesa, ajustable a la longitud, con borde adhesivo interno



Uso

La media de compensación de volumen se utiliza junto con el liner Control4Sil para compensar las fluctuaciones de volumen en el muñón de la pierna. La longitud de la media de compensación de volumen puede ajustarse mediante un hilo separador removible.

Características

El borde adhesivo en el interior evita que la media de compensación de volumen se desplace al colocarse la prótesis de pierna o durante el uso de la misma.

Material

poliamida, elastano

Tamaño de la media	Largo del muñón	Medidas des liner 65S1/...	Medidas des liner 65S5/...	Referencia
S	24 cm	26,5 – 32	25 – 28	25A45/S
M	24 cm	34 – 40	30 – 34	25A45/M
L	24 cm	45 – 50	36 – 40	25A45/L

Atención: si la media de compensación de volumen cubre uno o más bordes de obturación/sellado, el vacío puede perderse y la prótesis puede soltarse del muñón de la pierna. Por favor, use un máximo de 2 medias una encima de la otra.

Símbolos

Símbolos de cuidado



Lavar a mano



Lavar a 30 °C



Lavar a 40 °C



Lavar a 60 °C



No planchar



No blanquear – no usar detergentes que contengan agente blanqueador



No lavar en seco



No usar máquina secadora



Desinfectar

Símbolos de riesgo



llama



Signo de exclamación

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstrasse 10
82275 Emmering
Alemania
T +49 8141 6106-0
F +49 8141 6106-70
export@streifeneder.de
www.streifeneder.es/op



100W209/S 2022-7